


J20C Periuță de dinți electrică Manual de utilizare

Specificațiile produsului	
Denumirea produsului	Periuță de dinți electrică
Model nr.	J20C
Tensiune nominală și putere	DC3.7V-0.5W
Timp de încărcare	4 ore
Nivel impermeabil	IPX7
Pachetul include	Mâner perie x1 Cap de perie x4 Cablul de încărcare USB DC x1 Manual de utilizare x1

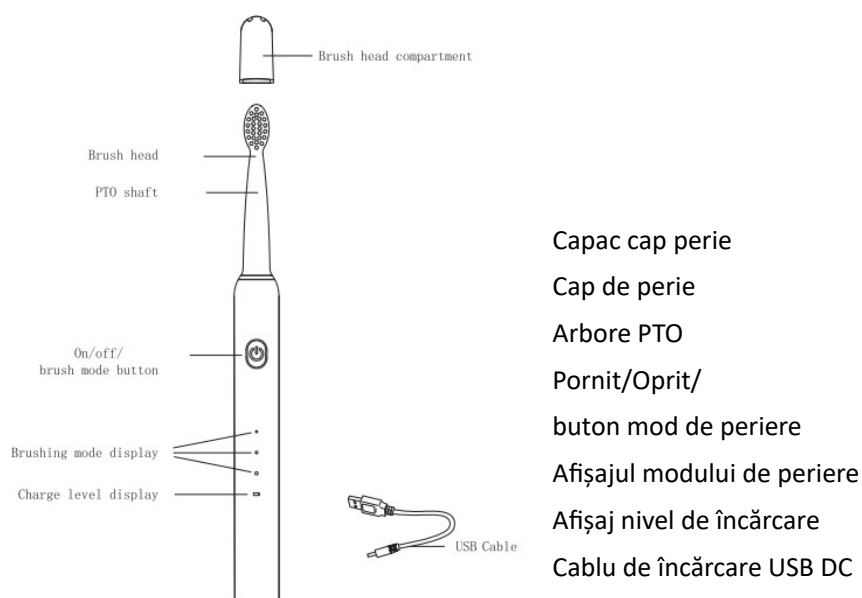

Utilizarea periuței de dinți:

Pasul1 Dacă motorul electric este slab și lumina roșie LED clipește atunci când periuța de dinți este pornită, vă rugăm să încărcați mai întâi bateria. Pentru încărcare, vă rugăm să consultați specificațiile de încărcare.

Pasul2 Vă rugăm să instalați corect capul periei strâns pe mâner. Este normal să existe un spațiu între ele.

Pasul3 Umeziți capul periei și aplicați o cantitate moderată de pastă de dinți (sau, aplicați pasta de dinți uniform pe dinți în prealabil).

Pasul4 Ghidați capul periutei spre dinți până când peri sunt la un unghi de 45 față de linia gingiei, înainte de a porni butonul on/off/mod de periere. Alegeți un mod de periaj favorabil.

Pasul 5 Ghidați capul periei încet de la dinte la dinte. Nu apăsați puternic și nu frecați.

Pasul6 Pentru a evita stropirea, nu scoateți periuța de dinți înainte de a termina și de a opri mânerul.

Pasul7 Clătiți capul periei cu apă curată și ștergeți-l cu o cârpă moale.

Pasul8 Clătiți-vă gura. Puneți capacul capului periutei și așezați-o într-un loc uscat și ventilat.

Informații importante privind încărcarea!

- ① Verificați dacă tensiunea și prizele sunt sigure și normale. Vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare corect la încărcare.
- ② Asigurați-vă că cablul de încărcare este uscat, portul de încărcare fără pete de apă și deteriorări etc. Conectați încărcătorul la o priză atunci când este sigur.
- ③ Dacă este prima dată când utilizați produsul, trebuie să îl testați. Încărcați complet bateria atunci când aceasta este descărcată sau goală.

Indicatorul bateriei periutei de dinți

Starea periutei de dinți	Indicator luminos
Periaj	Lumină stinsă
Baterie descărcată	Roșu intermitent
Încărcare	Roșu solid
Încărcat complet	De la roșu la verde solid

Notă:

- ① Vă rugăm să fiți atenți la starea luminii bateriei atunci când utilizați periuța de dinți.
 - ② Încărcați-o la timp în cazul în care bateria este descărcată sau se descarcă.
- Dacă periuța de dinți nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să o preîncărcați înainte de a o utiliza. Încărcarea sigură și corectă poate crește durata de viață a produsului.

Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau asistență, vă rugăm să vizitați www.jtforal.com sau să ne trimiteți un e-mail la support@jtforal.com

Limitarea garanției

Garanția nu acoperă următoarele:

-Tepe de perie

--Deteriorări cauzate de intervenții neprofesionale

--Deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, neglijarea întreținerii

--Deteriorări mecanice