


Specificațiile produsului	
Denumirea produsului	Periuță de dinți electrică
Model nr.	J40
Putere de ieșire	1.8W
Intrare nominală	3.7V
Durata de viață a bateriei	45 de zile de utilizare (când este complet încărcată)
Nivel de impermeabilitate	IPX7
Pachetul include	Mâner perie x1 Cap de perie x8 Suport perie x1 Cablul de încărcare USB DC x1 Manual de utilizare x1

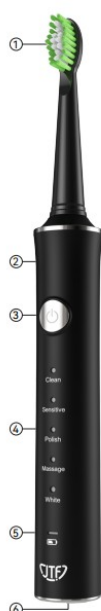

- ① Brush Head
- ② Mâner perie
- ③ Buton pornire/oprire
- ④ Modul de spălare
- ⑤ Indicator baterie
- ⑥ Portul de încărcare

Caracteristici

Moduri de periaj

Periuța de dinți electrică J40 este echipată cu 5 moduri diferite (prezentate ca în imagine)

Selectarea modului:

--Clicați pe butonul de alimentare pentru a porni periuța de dinți.

--Clicați din nou pe buton pentru a comuta între moduri. Alegeți modul de care aveți nevoie.

--Dacă nu mai există operațiuni, periuța de dinți se va opri automat după 2 minute. De asemenea, puteți apăsa lung butonul timp de 5 secunde pentru a vă opri.

-Scoasa de dinți va reține automat și va rămâne în modul respectiv data viitoare când o porniți.

Smartimer

Periuța de dinți se va opri automat după 2 minute, indicând că ciclul de periaj este complet. Profesioniștii dentare recomandă periajul nu mai puțin de 2 minute de două ori pe zi.

Quadpacer

Quadpacer este un interval care are o scurtă pauză la fiecare 30 de secunde pentru a vă reaminti să vă periați cele 4 secțiuni ale gurii în mod uniform și complet.

Încărcare

- (1) Porniți periuta de dinți înainte de a o utiliza pentru prima dată. Dacă simțiți că nu este suficient de puternică, reîncărcați-o.
- (2) Încărcând timp de 2 ore, periuta de dinți poate fi utilizată timp de aproximativ 45 de zile.
- (3) Dacă periuta de dinți nu a fost încărcată pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să așteptați între 6 și 10 minute pentru ca indicatorul luminos să se aprindă.
- (4) Dacă periuta de dinți nu a fost utilizată mai mult de 6 luni, încărcați-o timp de cel puțin 12 ore.

Cap de perie

1. Clătiți capul periei și periile după fiecare utilizare.
2. Scoateți capul periei din mâner și clătiți conexiunea capului periei cu apă caldă cel puțin o dată pe săptămână. Nu curățați cu apă fierbinte peste 40 °C sau soluții de curățare acide.
3. Înlocuiți capetele periei la fiecare 3 luni pentru rezultate optime. Utilizați numai capete de perie J40 compatibile cu mânerul periei JTF J40.

Indicatorul bateriei

- When bateria este descărcată: indicatorul bateriei va clipi roșu pentru a vă reaminti să încărcați.
- When bateria este mai mică de 3%: indicatorul bateriei va clipi roșu de câteva ori și apoi se va opri automat.
- During încărcare, lumina roșie clipește. Când încărcarea este finalizată, lumina roșie rămâne aprinsă.

Diagnosticarea defecțiunilor

Problemă	Cauze posibile	Contramăsură
Reducerea intensității vibrațiilor	1. Capul periei exercită o presiune prea mare asupra dinților 2. Capul periei este prea aproape de mâner	1. Așezați ușor capul periei pe dinți. 2. Scoateți capul periutei din mâner și re poziționați-l pe arborele de ieșire, păstrând o distanță între capul periutei de

		dinți și mânerul arborelui de ieșire
Chiar și după încărcare, periuța de dinți poate fi utilizată doar pentru o perioadă scurtă de timp.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timp de încărcare insuficient 2. Acest produs nu a fost utilizat timp de mai mult de 6 luni 3. Bateria a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Încărcați până când indicatorul luminos rămâne roșu 2. Încărcați periuța de dinți continuu timp de 12 ore 3. Contactați serviciul post-vânzare
Periuța de dinți nu funcționează	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baterie insuficientă 2. Bateria a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Încărcați periuța de dinți timp de 2 ore 2. Contactați serviciul post-vânzare

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la support@jtforal.com
