


正面

**Perfect<sup>®</sup>  
Medical**

**Duș Bucal Portabil**  
Manual de utilizare

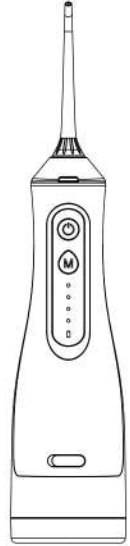


**PM-51**      **BV-612**

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați corespunzător înainte de utilizare.

**CUPRINS**

Cuprins ----- 01  
 Descrierea produsului ----- 02  
 Parametrii produsului ----- 02  
 Ghid de utilizare ----- 03  
 Precauții la încărcare ----- 03  
 Atenționări importante ----- 04  
 Avertisment ----- 04  
 Sfaturi speciale ----- 05  
 Caracteristicile produsului ----- 05  
 Ghid de curățare ----- 06  
 Îngrijire și Întreținere ----- 07  
 Ghid de depanare ----- 07  
 Servicii post-vânzare ----- 08

**Descrierea produsului**

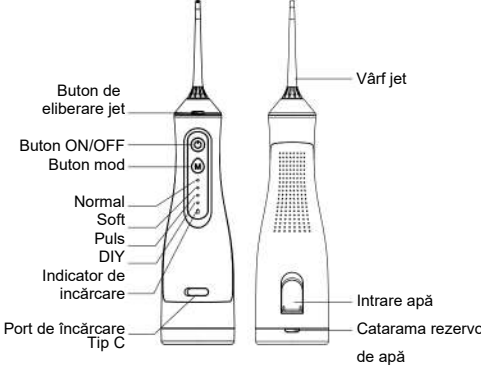

**Notă:** Este posibil să existe o cantitate mică de lichid în rezervorul de apă; aceasta este apă distilată rămasă în urma inspecției din fabrică. Nu reprezintă un pericol pentru sănătate sau siguranță.

**Parametrii produsului**  
 Denumire Produs: Irigator Bucal  
 Model Produs: BV-612  
 Capacitate Rezervor Apă: 320ml  
 Metodă Încărcare: Încărcare USB Tip C  
 Tensiune Nominată: 3.7V  
 Putere Nominată: 8.5W  
 Interval Presiune: 30-120 PSI  
 Pulsaj: 1400-1800 puls./min  
 Moduri de Lucru: Normal / Soft (Delicat) / Pulse (Pulsat) / DIY (Personalizat)  
 Autonomie Baterie: 20-25 zile (utilizat de 2 ori pe zi, timp de 1 minut)

**Ghid de utilizare**

- Pomirea: Asigurați-vă că produsul este complet încărcat înainte de prima utilizare. Apăsați mai întâi butonul On/Off, apoi apăsați butonul de mod pentru a selecta modul de lucru.
- Umplerea rezervorului de apă: Deschideți orificiul de admisie a apei de pe rezervor, umpleți rezervorul cu apă, închideți capacul orificiului și apăsați ferm. (Stat: Rezervorul de apă este detașabil și poate fi scos pentru injectarea apei. Acesta nu poate fi pornit și utilizat în timpul lucrului.)
- Instalarea/Înlocuirea capătului de curățare: Introduceți capătul de curățare în locașul din mijlocul capului superior al irigatorului bucal. Pentru a înlocui sau a scoate capătul de curățare, apăsați butonul de Blocare/Deblocare a capătului.
- Selectarea modului de lucru: Când îl utilizați pentru prima dată, apăsați butonul de mod de pe mâner pentru a selecta modul de curățare corespunzător. De asemenea, puteți alege modul de curățare conform îndrumărilor dentiștilor profesioniști. (**Modul Normal:** mod de curățare standard, poate elimina eficient reziduurile alimentare din spațiul dintre dinți, curăță dinții în profunzime și împropățează gura; **Modul Soft:** masaj delicat al gingiilor; **Modul Pulse:** masaj prin pulsații al gingiilor, promovează circulația sângelui; **Modul DIY:** utilizatorii pot personaliza intensitatea curățării în funcție de preferințele personale și pot seta diverse intensități de curățare în intervalul respectiv.)

**Precauții la încărcare**

- Vă rugăm să încărcați produsul timp de 8 ore înainte de prima utilizare. (Note: Vă rugăm să utilizați încărcătorul corespunzător pentru a încărca acest produs.)
- Deschideți capacul de cauciuc al interfeței de încărcare a unității principale, introduceți mufa USB în portul de încărcare (asigurați-vă că nu există reziduri de lichid în mufa înainte de a introduce conectorul).
- Introduceți interfața USB în încărcător, iar apoi introduceți încărcătorul în priză.
- În timpul încărcării, indicatoarele luminoase de încărcare vor fi roșii și vor clipi ușor. Când este complet încărcat, indicatorul de încărcare va rămâne verde, apoi puteți scoate încărcătorul.

**Atenționări importante**

- Nu dezasamblați și nu reparați singuri componentele interne.
- Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat înainte și după utilizare și păstrați cablul de alimentare departe de suprafețele încălzite.
- Nu puneți și nu introduceți niciodată obiecte străine în deschideri sau furtunuri.
- Nu atingeți sursa de alimentare și nu încărcați produsul într-un mediu care nu este uscat.
- Rezervorul de apă al acestui produs poate fi umplut numai cu apă sau altă soluție non-corozivă recomandată de un medic profesionist.

**Avertisment**

- Consultați medicul stomatolog înainte de a utiliza acest produs dacă ați avut intervenții chirurgicale orale sau dentare în ultimele 2 luni.
- Când utilizați acest produs pentru curățarea orală pentru prima dată, este posibil să experimentați o ușoară sângerare a gingiilor, chiar dacă gingiile dumneavoastră sunt sănătoase. Acest lucru se întâmplă deoarece gingiile sunt stimulate pentru prima dată de presiunea jetului; în general, sângerarea se va opri după 1 până la 2 săptămâni de adaptare. Dacă sângerarea gingivală durează mai mult de 2 săptămâni, poate însemna că gingiile dumneavoastră au o problemă. În acest caz, încetați utilizarea produsului și consultați medicul stomatolog.
- Nu utilizați acest produs dacă cablul USB sau mufa produsului sunt deteriorate, dacă acesta nu funcționează, a căzut, este deteriorat sau a căzut în orice lichid.
- Acest produs nu este adecvat pentru persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență, fără supravegherea tutorelui.
- Nu injectați apă sub limbă, în urechi, nas sau alte părți sensibile ale corpului atunci când utilizați acest produs. Presiunea generată de acest produs poate cauza daune grave în aceste zone.

**Sfaturi utile**

- Când produsul este utilizat pentru prima dată, se recomandă utilizarea modului Soft.
- În timpul utilizării, capătul de curățare trebuie să fie aproape de spațiul interdental. Cu cât capătul de curățare este mai departe, cu atât presiunea apei va fi mai puternică.

反面

**Sfaturi speciale**

- Verificarea nivelului bateriei:** Când produsul este în modul standby, apăsați lung butonul Mode pentru a afișa nivelul de putere. Dacă nivelul este peste 75%, 4 indicatoare de mod vor fi aprinse; între 50%-75%, 3 indicatoare vor fi aprinse; între 25%-50%, 2 indicatoare vor fi aprinse; iar sub 25%, indicatorul modului DIY va fi aprins.
- Setarea modului DIY:** La comutarea pe cel de-al 4-lea mod de lucru, DIY, dispozitivul va începe să funcționeze cu setările de la ultima utilizare a acestui mod. În timpul funcționării în modul DIY, apăsați lung butonul ON/OFF din nou; presiunea apei va crește de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel și va rămâne temporar la presiunea maximă, circulând conform acestui mod. Eliberați butonul ON/OFF pentru a selecta starea de funcționare din acel punct al secțiunii (noua stare este setată), iar sistemul va menține noua stare pentru utilizare.

**Caracteristicile produsului**

- Design cu rezervor dublu de 320ml, detașabil și extensibil, ușor de curățat în interior.
- Port de încărcare Tip C, convenabil pentru încărcarea produsului.
- Design rezistent la apă IPX7 pentru întregul produs, astfel încât acesta poate fi utilizat sub duș.
- Reminder timp: aparatul se va opri după 2 minute de funcționare continuă.

**Ghid de curățare**

Nu scufundați dispozitivul în niciun lichid.

**Rezervor de apă:**

- Scoateți ștecherul din priză înainte de curățare.
- Utilizați o perie sau un obiect similar pentru a spăla murdăria, apoi ștergeți-l cu o cârpă.
- Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să uscați rezervorul de apă.

**Capete de curățare (Jet Tips):**

- Apăsați butonul de Blocare/Deblocare a capătului pentru a scoate capătul de curățare. Curățați-l cu apă și ștergeți-l cu o cârpă.
- Se recomandă înlocuirea capătului de curățare cu unul nou la fiecare 3 luni. În caz contrar, vârful capătului va deveni prea mare pentru o curățare eficientă și poate cauza chiar defecțiuni.

**Corp principal:**

- Dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să mențineți irigatorul bucal pornit și clătit cel puțin o dată pe lună.
- Vă rugăm să scurgeți apa din interiorul irigatorului după fiecare utilizare, adică lăsați-l pornit timp de aproximativ zece secunde fără apă, apoi opriți-l când nu mai iese apă din duză.
- După utilizarea unei ape de gură cu zahăr, vă rugăm să îl spălați din nou cu apă curată.
- Dacă apa nu curge după o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți duza, să setați irigatorul pe cea mai înaltă treaptă și să îl puneți sub robinet; lăsați apa să curgă în orificiul duzei și porniți aparatul; acesta va reveni la normal în câteva secunde.
- Nu utilizați alcool, benzină, diluant etc. pentru a șterge produsul.
- Nu spălați cu apă fierbinte de peste 50°C.
- Ștergeți apa după curățare.

**Tab de aspirație:**

- Ștergeți cu o cârpă după curățare.
- Nu îndoiți tubul de aspirație. În caz contrar, tubul de aspirație se poate defecta, oprind absorbția apei în timpul funcționării.
- Sita filtrului tubului de aspirație trebuie curățată la timp pentru a preveni înfundarea.

**Capacul rezervorului de apă:**

- Ștergeți murdăria, altfel aceasta va cauza scurgeri de apă.

**Îngrijire și întreținere**

- Vă rugăm să curățați produsul cu apă curată sau cu un detergent neutru. Nu utilizați detergenți corozivi sau abrazivi, în caz contrar produsul va fi deteriorat.
- Nu introduceți corpul principal în apă pentru a-l curăța. Ștergeți-l cu o cârpă uscată sau cu o cârpă umedă, sau curățați-l sub jet de apă și apoi uscați-l cu o cârpă.
- Recomandăm schimbarea capătului de curățare la fiecare trei luni.

**Ghid de depanare**

| Probleme  | Motiv  | Soluție  |
|---|--|--|
| Capăt de curățare cîștat                                    | Capătul este deteriorat grav                       | Înlocuiți cu un capăt de curățare nou                    |
| Rezervorul de apă are scurgeri                              | Înveliul de etanșare este slăbit                   | Reinstalați corect                                       |
|   | Capacul rezervorului nu se închide bine            | Închideți capacul ferm                                   |
| Scurgeri de apă între capătul de curățare și partea cu flex | Capătul de curățare nu este instalat corespunzător | Instalați capătul de curățare corect                     |
|   | Utilizare la tensiune scăzută                      | Utilizați după reîncărcare                               |
| Presiune slabă sau apă nu este pulverizată                  | Sita de filtrare este înfundată                    | Curățați sita de filtrare                                |
|   | Selecție greșită a modului                         | Selecțiați modul Normal                                  |
| Plășile laterale ale rezervorului prezintă scurgeri         | Orificiul de intrare a aerului produce apă         | Fenomen standard, principul presiunii ridicate a aerului |

Importator și distribuitor:  
 ● PERFECT MEDICAL s.r.l.  
 loc. Sântion nr. 684 jud. Bihor  
 România

Tel: 072356589  
 Email: perfectmedical@yahoo.com  
 Site: www.perfect-medical.ro

料号:  
 材质: 128g铜版纸, 单黑印刷, 折页, 不过胶  
 尺寸: 76x114mm  
 日期: 2024-11-11