


正面

Perfect[®] Medical

Duș Bucal Portabil

Manual de utilizare

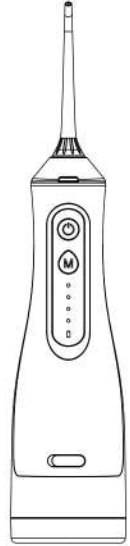

PM-51
BV-612


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați corespunzător înainte de utilizare.

CUPRINS

Cuprins ----- 01
 Descrierea produsului ----- 02
 Parametrii produsului ----- 02
 Ghid de utilizare ----- 03
 Precauții la încărcare ----- 03
 Atenționări importante ----- 04
 Avertisment ----- 04
 Sfaturi speciale ----- 05
 Caracteristicile produsului ----- 05
 Ghid de curățare ----- 06
 Îngrijire și Întreținere ----- 07
 Ghid de depanare ----- 07
 Servicii post-vânzare ----- 08

— 01 —

Descrierea produsului

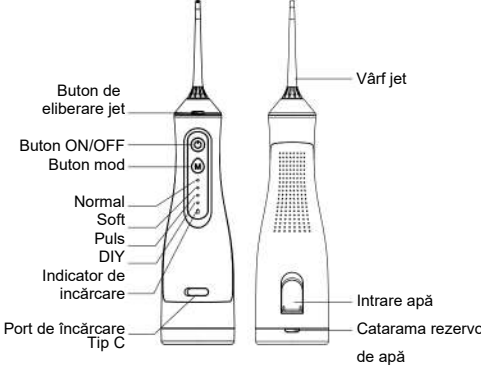

Notă: Este posibil să existe o cantitate mică de lichid în rezervorul de apă; aceasta este apă distilată rămasă în urma inspecției din fabrică. Nu reprezintă un pericol pentru sănătate sau siguranță.

Parametrii produsului

Denumire Produs: Irigator Bucal
 Model Produs: BV-612
 Capacitate Rezervor Apă: 320ml
 Metodă Încărcare: Încărcare USB Tip C
 Tensiune Nominată: 3.7V
 Putere Nominată: 8.5W
 Interval Presiune: 30-120 PSI
 Pulsaj: 1400-1800 puls./min
 Moduri de Lucru: Normal / Soft (Delicat) / Pulse (Pulsat) / DIY (Personalizat)
 Autonomie Baterie: 20-25 zile (utilizat de 2 ori pe zi, timp de 1 minut)

— 02 —

Ghid de utilizare

- Pomirea: Asigurați-vă că produsul este complet încărcat înainte de prima utilizare. Apăsați mai întâi butonul On/Off, apoi apăsați butonul de mod pentru a selecta modul de lucru.
- Umplerea rezervorului de apă: Deschideți orificiul de admisie a apei de pe rezervor, umpleți rezervorul cu apă, închideți capacul orificiului și apăsați ferm. (Stat: Rezervorul de apă este detașabil și poate fi scos pentru injectarea apei. Acesta nu poate fi pornit și utilizat în timpul lucrului.)
- Instalarea/Înlocuirea capătului de curățare: Introduceți capătul de curățare în locașul din mijlocul capului superior al irigatorului bucal. Pentru a înlocui sau a scoate capătul de curățare, apăsați butonul de Blocare/Deblocare a capătului.
- Selectarea modului de lucru: Când îl utilizați pentru prima dată, apăsați butonul de mod de pe mâner pentru a selecta modul de curățare corespunzător. De asemenea, puteți alege modul de curățare conform îndrumărilor dentiștilor profesioniști. (**Modul Normal:** mod de curățare standard, poate elimina eficient reziduurile alimentare din spațiul dintre dinți, curăță dinții în profunzime și împropătează gura; **Modul Soft:** masaj delicat al gingiilor; **Modul Pulse:** masaj prin pulsații al gingiilor, promovează circulația sângelui; **Modul DIY:** utilizatorii pot personaliza intensitatea curățării în funcție de preferințele personale și pot seta diverse intensități de curățare în intervalul respectiv.)

Precauții la încărcare

- Vă rugăm să încărcați produsul timp de 8 ore înainte de prima utilizare. (Note: Vă rugăm să utilizați încărcătorul corespunzător pentru a încărca acest produs.)
- Deschideți capacul de cauciu al interfeței de încărcare a unității principale, introduceți mufa USB în portul de încărcare (asigurați-vă că nu există reziduri de lichid în mufa înainte de a introduce conectorul).
- Introduceți interfața USB în încărcător, iar apoi introduceți încărcătorul în priză.
- În timpul încărcării, indicatoarele luminoase de încărcare vor fi roșii și vor clipi ușor. Când este complet încărcat, indicatorul de încărcare va rămâne verde, apoi puteți scoate încărcătorul.

— 03 —

Atenționări importante

- Nu dezasamblați și nu reparați singuri componentele interne.
- Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat înainte și după utilizare și păstrați cablul de alimentare departe de suprafețele încălzite.
- Nu puneți și nu introduceți niciodată obiecte străine în deschideri sau furtunuri.
- Nu atingeți sursa de alimentare și nu încărcați produsul într-un mediu care nu este uscat.
- Rezervorul de apă al acestui produs poate fi umplut numai cu apă sau altă soluție non-corozivă recomandată de un medic profesionist.

Avertisment

- Consultați medicul stomatolog înainte de a utiliza acest produs dacă ați avut intervenții chirurgicale orale sau dentare în ultimele 2 luni.
- Când utilizați acest produs pentru curățarea orală pentru prima dată, este posibil să experimentați o ușoară sângerare a gingiilor, chiar dacă gingiile dumneavoastră sunt sănătoase. Acest lucru se întâmplă deoarece gingiile sunt stimulate pentru prima dată de presiunea jetului; în general, sângerarea se va opri după 1 până la 2 săptămâni de adaptare. Dacă sângerarea gingivală durează mai mult de 2 săptămâni, poate însemna că gingiile dumneavoastră au o problemă. În acest caz, încetați utilizarea produsului și consultați medicul stomatolog.
- Nu utilizați acest produs dacă cablul USB sau mufa produsului sunt deteriorate, dacă acesta nu funcționează, a căzut, este deteriorat sau a căzut în orice lichid.
- Acest produs nu este adecvat pentru persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență, fără supravegherea tutorelui.
- Nu injectați apă sub limbă, în urechi, nas sau alte părți sensibile ale corpului atunci când utilizați acest produs. Presiunea generată de acest produs poate cauza daune grave în aceste zone.

Sfaturi utile

- Când produsul este utilizat pentru prima dată, se recomandă utilizarea modului Soft.
- În timpul utilizării, capătul de curățare trebuie să fie aproape de spațiul interdental. Cu cât capătul de curățare este mai departe, cu atât presiunea apei va fi mai puternică.

— 04 —

反面

Sfaturi speciale

- Verificarea nivelului bateriei:** Când produsul este în modul standby, apăsați lung butonul Mode pentru a afișa nivelul de putere. Dacă nivelul este peste 75%, 4 indicatoare de mod vor fi aprinse; între 50%-75%, 3 indicatoare vor fi aprinse; între 25%-50%, 2 indicatoare vor fi aprinse; iar sub 25%, indicatorul modului DIY va fi aprins.
- Setarea modului DIY:** La comutarea pe cel de-al 4-lea mod de lucru, DIY, dispozitivul va începe să funcționeze cu setările de la ultima utilizare a acestui mod. În timpul funcționării în modul DIY, apăsați lung butonul ON/OFF din nou; presiunea apei va crește de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel și va rămâne temporar la presiunea maximă, circulând conform acestui mod. Eliberați butonul ON/OFF pentru a selecta starea de funcționare din acel punct al secțiunii (noua stare este setată), iar sistemul va menține noua stare pentru utilizare.

Caracteristicile produsului

- Design cu rezervor dublu de 320ml, detașabil și extensibil, ușor de curățat în interior.
- Port de încărcare Tip C, convenabil pentru încărcarea produsului.
- Design rezistent la apă IPX7 pentru întregul produs, astfel încât acesta poate fi utilizat sub duș.
- Reminder timp: aparatul se va opri după 2 minute de funcționare continuă.

— 05 —

Ghid de curățare

Nu scufundați dispozitivul în niciun lichid.

Rezervor de apă:

- Scoateți ștecherul din priză înainte de curățare.
- Utilizați o perie sau un obiect similar pentru a spăla murdăria, apoi ștergeți-l cu o cârpă.
- Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să uscați rezervorul de apă.

Capete de curățare (Jet Tips):

- Apăsați butonul de Blocare/Deblocare a capătului pentru a scoate capătul de curățare. Curățați-l cu apă și ștergeți-l cu o cârpă.
- Se recomandă înlocuirea capătului de curățare cu unul nou la fiecare 3 luni. În caz contrar, vârful capătului va deveni prea mare pentru o curățare eficientă și poate cauza chiar defecțiuni.

Corp principal:

- Dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să mențineți irigatorul bucal pornit și clătit cel puțin o dată pe lună.
- Vă rugăm să scurgeți apa din interiorul irigatorului după fiecare utilizare, adică lăsați-l pornit timp de aproximativ zece secunde fără apă, apoi opriți-l când nu mai iese apă din duză.
- După utilizarea unei ape de gură cu zahăr, vă rugăm să îl spălați din nou cu apă curată.
- Dacă apa nu curge după o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți duza, să setați irigatorul pe cea mai înaltă treaptă și să îl puneți sub robinet; lăsați apa să curgă în orificiul duzei și porniți aparatul; acesta va reveni la normal în câteva secunde.
- Nu utilizați alcool, benzină, diluant etc. pentru a șterge produsul.
- Nu spălați cu apă fierbinte de peste 50°C.
- Ștergeți apa după curățare.

Tub de aspirație:

- Ștergeți cu o cârpă după curățare.
- Nu îndoiți tubul de aspirație. În caz contrar, tubul de aspirație se poate defecta, oprind absorbția apei în timpul funcționării.
- Sita filtrului tubului de aspirație trebuie curățată la timp pentru a preveni înfundarea.

Capacul rezervorului de apă:

- Ștergeți murdăria, altfel aceasta va cauza scurgeri de apă.

— 06 —

Îngrijire și întreținere

- Vă rugăm să curățați produsul cu apă curată sau cu un detergent neutru. Nu utilizați detergenți corozivi sau abrazivi, în caz contrar produsul va fi deteriorat.
- Nu introduceți corpul principal în apă pentru a-l curăța. Ștergeți-l cu o cârpă uscată sau cu o cârpă umedă, sau curățați-l sub jet de apă și apoi uscați-l cu o cârpă.
- Recomandăm schimbarea capătului de curățare la fiecare trei luni.

Ghid de depanare

Problema	Motiv	Soluție
Capăt de curățare oșpat	Capătul este deteriorat grav	Înlocuiți cu un capăt de curățare nou
Rezervorul de apă are scurgeri	Învelișul de etanșare este slăbit	Reinstalați corect
	Capacul rezervorului nu se închide bine	Inchideți capacul ferm
Scurgeri de apă între capătul de curățare și partea cu filet	Capătul de curățare nu este instalat corespunzător	Instalați capătul de curățare corect
	Utilizare la tensiune scăzută	Utilizați după reîncărcare
Presiune slabă sau apă nu este pulverizată	Sita de filtrare este înfundată	Curățați sita de filtrare
	Selecție greșită a modului	Selectați modul Normal
Plășile laterale ale rezervorului prezintă scurgeri	Orificiul de intrare a aerului produce apă	Fenomen standard, principul presiunii ridicate a aerului

Importator și distribuitor:
 ● PERFECT MEDICAL s.r.l.
 loc. Sântion nr. 684 jud. Bihor
 România

Tel: 072356586
 Email: perfectmedical@yahoo.com
 Site: www.perfect-medical.ro

— 07 —

— 08 —

料号:
 材质: 128g铜版纸, 单黑印刷, 折页, 不过胶
 尺寸: 76x114mm
 日期: 2024-11-11