

marimer

baby

Съвети за след всяка употреба

Отворете бебешкия аспиратор за нос [B+D] и премахнете филтъра MARIMER [C] с помощта на лентата му.

Изхвърлете филтъра. Почиствайте краищата за нос [A] и резервоара [B] с гореща вода със сапун след всяка употреба, изплаквайте с чиста вода и подсушете.

Прикачете отново филтъра MARIMER [C] към резервоара [B]. След което сглобете основата [D] върху резервоара [B].

Съхранявайте бебешкия назален аспиратор в кутията му.

Преди всяка употреба, уверете се, че всеки компонент е в добро състояние. Сменете бебешкия аспиратор за нос и/или краищник при най-малките признаци на износване или повреда. Не изварявайте. Посъветвайте се с вашия фармацевт.

Предупреждения

Ако симптомите продължават или се изострят, консултирайте се с вашия лекар.

Моля, съобщавайте за всяка нежелана реакция с този продукт на уебсайта на Laboratoires Gilbert www.labogilbert.fr и/или на националния компетентен орган.

Филтрите за еднократна употреба са в отделна в кутия от 20бр.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

RO Aspiratorul nazal pentru bebeluși MARIMER este soluția ideală pentru a aspira eficientă nasul bebelușului. Forma și textura moale a aplicatorului nazal asigură confort maxim pentru bebeluș.

Filtrul aspiratorului nazal pentru bebeluși este prevăzut cu o bandă pentru a putea fi înlocuit fără a vă murdări mâinile. Tehnologia de filtrare MARIMER asigură aspirarea eficientă a nasului datorită capacității mari de aspirare. Mucozitățile sunt aspirate delicat și rămân în rezervor, fără risc de a se întoarce în nasul bebelușului

Recomandări pentru prima utilizare

Spălați-vă pe mâini.

Desfaceți aspiratorul nazal pentru bebeluși, decupland rezervorul [B] de bază [D].

Curățați aplicatorul nazal [A] și rezervorul [B] cu apă caldă și săpun, apoi clătiți cu apă rece. Lăsați să se usuce. Reatașați baza [D] la rezervor [B].

Pentru a curăța nasul bebelușului

Așezați bebelușul pe masa de înfășat și ridicati-i capul. Instalați ser fiziologic sau soluție salină diluată izotonică în fiecare nară a bebelușului pentru a facilita aspirarea secrețiilor.

Introduceți aplicatorul bucal [E] în gura dumneavoastră. Introduceți aplicatorul nazal [A] într-una din nările bebelușului și aspirați.


Repețați pentru cealaltă nară.

Recomandări după fiecare utilizare

Desfaceți aspiratorul nazal pentru bebeluși [B+D] și scoateți filtrul MARIMER [C] cu ajutorul benzii.

Aruncați filtrul. Curățați aplicatorul nazal [A] și rezervorul [B] cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare și clătiți cu apă rece. Lăsați să se usuce.

Introduceți ușor filtrul MARIMER [C] în rezervor [B].

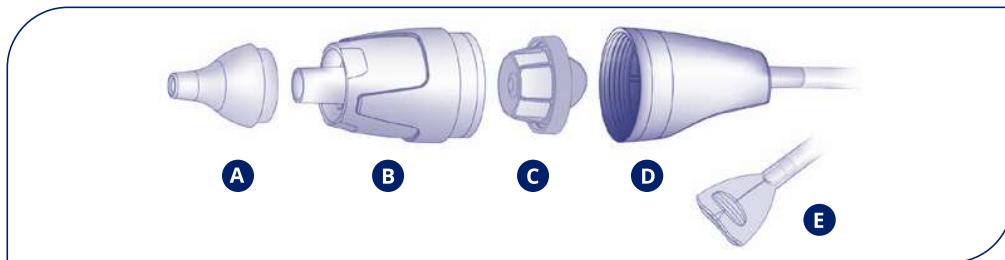

Apoi reatașați baza [D] la rezervor [B].

Păstrați aspiratorul nazal pentru bebeluși în cutia sa. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că toate componentele sunt în perfectă stare. Înlocuiți aspiratorul nazal pentru bebeluși și/sau aplicatorul la primul semn de uzură sau deteriorare. A nu se fierbe. Cereți sfatul farmacistului.

Atenționări

Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul.

Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv către Laboratoires Gilbert - website : www.labogilbert.fr și/sau către autoritatea națională competentă.

Filtre de unică folosință disponibile separat în cutie de câte 20.

A NU SE LĂSA LA VEDERE ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.

CS Nosní odsávačka hlenů pro kojence MARIMER představuje ideální řešení pro účinné vysmrkání a pro úlevu nosu vašeho kojence. Tvar a jemná textura nosní koncovky zajišťují vašemu kojenci maximální pohodlí. Filtr nosní odsávačky je vybaven jazyčkem pro snadnou výměnu filtru bez úsilí rukou. Filtrační technologie MARIMER zajišťuje vysoce účinné vysmrkání díky vysokému sacímu výkonu. Hlen je vysáván bez námahy a zůstává uložen v zásobníku, aniž by se mohl vrátit zpět do nosu vašeho kojence.

Rady při prvním použití
Umyjte si ruce. Otevřete tělo nosní odsávačky pro kojence vyjmutím zásobníku [B] ze základny [D]. Očistěte teplou mýdlovou vodou nosní koncovku [A] a zásobník [B], poté je opláchněte čistou vodou. Osušte. Upevněte základnu [D] na zásobník [B].

Rady při prvním použití

Umyjte si ruce.

Otevřete tělo nosní odsávačky pro kojence vyjmutím zásobníku [B] ze základny [D].

Očistěte teplou mýdlovou vodou nosní koncovku [A] a zásobník [B], poté je opláchněte čistou vodou. Osušte. Upevněte základnu [D] na zásobník [B].

Vysmrkání kojence

Položte dítě na přebalovací pult a zvedněte mu hlavu. Pro snazší odsátí sekretů podejte do každé nosní díry kojence fyziologické sérum nebo zředěný izotonický roztok mořské vody.

Vložte ústní koncovku [E] do svých úst.

Umístěte nosní koncovku [A] do nosní díry kojence a odsajte.

Obdobně postupujte i u druhé nosní díry kojence.

Rady po každém použití

Otevřete odsávačku [B+D] a vyjměte filtr MARIMER [C] pomocí jeho jazyčku.

Filtr vyhodte. Po každém použití očistěte teplou mýdlovou vodou nosní koncovku [A] a zásobník [B] a opláchněte je čistou vodou. Osušte.

Filtr MARIMER [C] jednoduše zajistěte v zásobníku [B]. Pak znovu upevněte základnu [D] na zásobník [B]. Uchovávejte odsávačku v pouzdře.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je odsávačka v bezvadném stavu. Odsávačku a/nebo koncovku vyměňte při sebemenších známkách opotřebení nebo poškození. Nevyvažujte. Poradte se se svým lékařem.

Upozornění

Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc.

Dojde-li k jakémukoli závažné nehodě ve spojitosti s tímto zdravotnickým prostředkem, oznamte to prosím

Laboroții Laboratoires Gilbert – webová adresa: www.labogilbert.fr a/nebo vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

Filtry pro jednorázové použití jsou k dispozici samostatně v krabičce po 20 kusech.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ.

FILTRATION TECHNOLOGY
Perfect hygiene
TECHNOLOGIE DE FILTRATION
Hygiène parfaite
TECNOLOGÍA DE FILTRADO
Higiene perfecta
ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИЛТРИРАНЕ
Идеална хигиена
TEHNOLOGIE DE FILTRARE
Igienă perfectă
FILTRAČNÍ TECHNOLOGIE
Dokonalá hygiena



ERGONOMIC
Soft nozzle for maximum comfort
ERGONOMIQUE
Embout souple pour un confort maximum
ERGONÓMICO
Cánula flexible para la máxima comodidad
ЕРГОНОМІЧНОСТ
Мек накрайник за максимален комфорт
ERGONOMIC
Aplicator moale pentru confort maxim
ERGONOMICKÁ
Pružná koncovka pro maximální pohodlí



CONVENIENT
Large suction capacity
High performance blowing
PRATIQUE
Grande capacité d'aspiration
Mouchage performant
PRÁCTICO
Gran capacidad de aspiración
Aspiración nasal eficaz
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
Голям всмукателен капацитет
Аспириране с отличен резултат
PRACTIC
Capacitate mare de aspirare
Curățare performantă a nasului
PRAKTIČKÁ
Vysoká sací schopnost
Vysoká účinnost vysmrkání



Dispositif médical
Medical device
Producto sanitario
Медицинско изделие
Dispositiv medical
Zdravotnický prostředek



Laboratoires GILBERT

928, avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair - France

IG 667311NOT00 | 05N0112 000100 | LBC 01/21