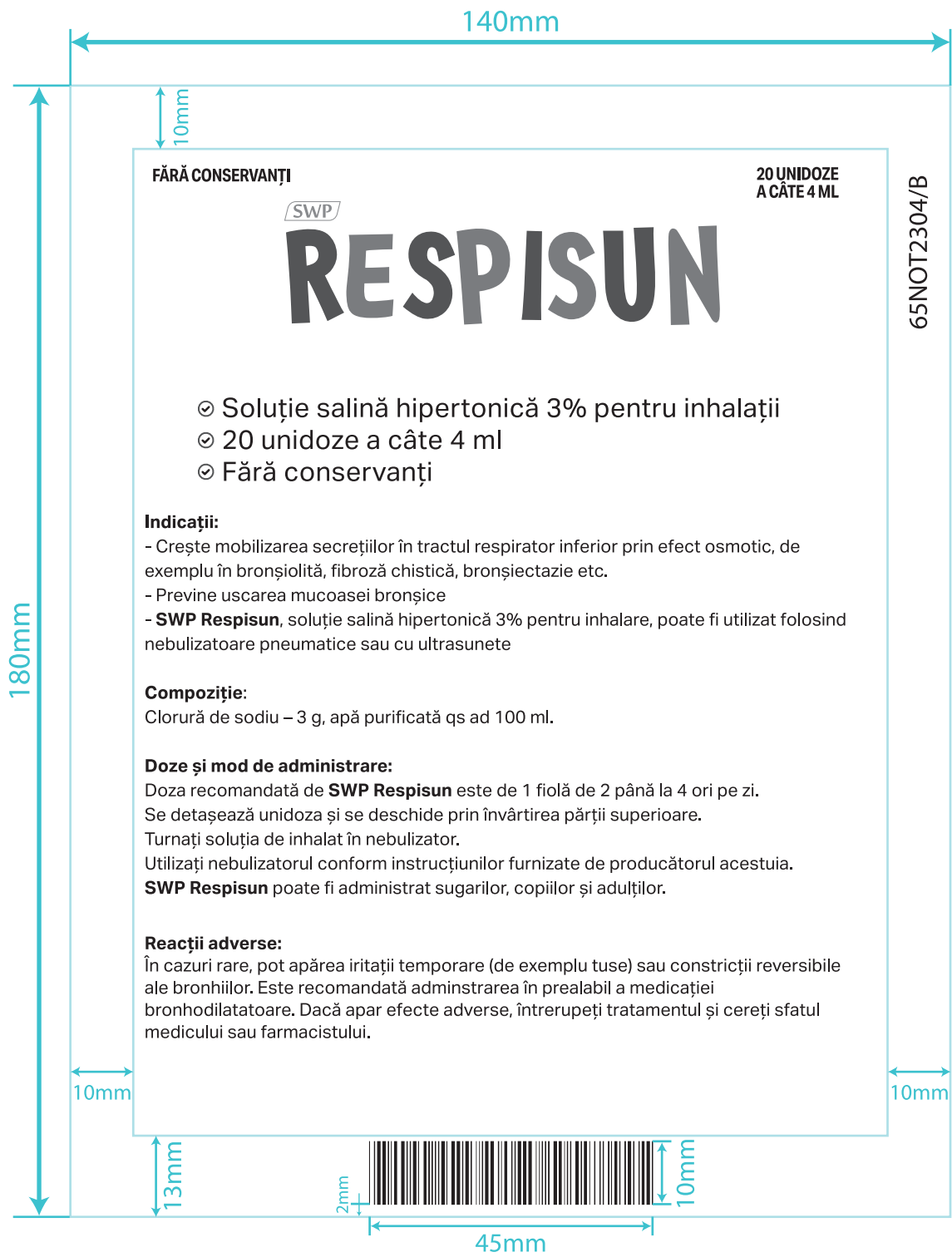




140mm

45mm

13mm

2mm



10mm

180mm

65NOT2304/B

RO.14.09.3

10mm

10mm

Precauții la utilizare:

- De unică utilizare
- Destinat strict pentru inhalare
- **A nu se utiliza injectabil**
- Verificați integritatea fiolelor unidoză înainte de utilizare. Nu utilizați fiolele dacă sunt deteriorate
- Urmați instrucțiunile de utilizare ale nebulizatorului
- Dacă există tendința de a dezvolta dispnee sau hipersensibilitate, inhalarea soluției nu se va realiza fără supraveghere medicală
- Nu se va amesteca cu medicamente
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- A nu se utiliza după data de expirare
- După deschidere fiolele unidoză se vor utiliza imediat și dacă rămâne soluție se va arunca; deoarece produsul nu conține conservanți, există riscul de administrare a unei soluții contaminate dacă aceasta este reutilizată după deschidere.

SWP Respisun este un dispozitiv medical Clasa IIa.
Data marcării CE: 11.12.2013. Data revizuirii instrucțiunilor: 12.2013

 Laboratoire UNITHER
151, Rue André Durouchez
Espace Industriel Nord
CS 28028
80084 Amiens Cedex 2
Franța

Distribuitor:
Sun Wave Pharma SRL
Șoseaua Pipera, nr. 43
Floreasca Park, Clădirea A, etaj 3
Sector 2, București, România
office@sunwavepharma.com

Importator în Republica Moldova:
Dita EstFarm SRL
Str. Burebista, nr. 23
Chișinău, Republica Moldova
Tel: (+373) 22 40 54 24
Număr înregistrare: DM000911310

Fabricat în Franța

MD



STERILE

A


0459

Pentru mai multe informații accesați
www.sunwavepharma.com