

Feel Thin




ACUM TOATE PREZERVATIVELE DUREX AU ACEEAȘI DISPUNERE



PENTRU MAI PUȚINĂ PRESIUNE & MAI MULTĂ PLĂCERE

Prezervative Durex Feel Thin


Prezervative Durex Feel Thin sunt prezervative subțiri pentru senzații cât mai intense și sensibilitate crescută în timpul actului sexual.



- Forma anatomică Easy-On cu rezervor pentru confort
- Prezervative subțiri, transparente din cauciuc natural (latex)
- Diametru nominal: 56 mm
- Lubrifiere: lubrifiant siliconic standard
- Testate dermatologic;*
- 100% testat electronic; **

*Potrivit unui studiu de toleranță cutanată realizat în 2018

**Toate prezervativele Durex sunt testate pentru a depista defectele de fabricație

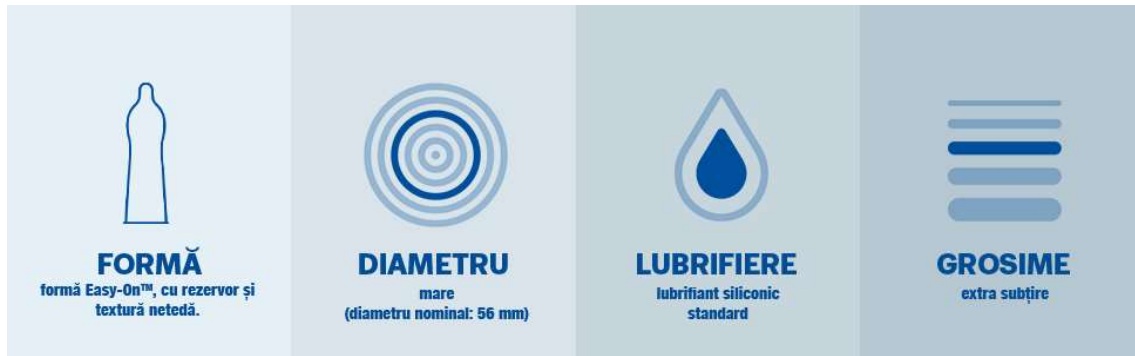

Senzație naturală

Durex Thin Feel este produs dintr-un latex mai subțire, pentru a spori intensitatea senzațiilor de plăcere pentru ambii parteneri.

CU FORMA



Conceput special pentru nevoile tale

Concepute special pentru tine, proiectate pentru a-ți urma forma, pentru o experiență mai confortabilă și mai plăcută.

EASY-ON™



Calitate Durex

Durex întrunește standardele internaționale de calitate***, lăsându-ți posibilitatea de a savura experiențe sexuale excelente, fără bătaie de cap.

*** EN ISO 15223-1: 2012; EN 1041: 2008; EN ISO 10993-1: Oct 2009; EN ISO 13485: 2012; EN ISO 9001:2008; EN ISO 14971: 2012; EN ISO 4074:2015



Miros mai bine

Prezervativele Durex miros mai bine datorită modului în care sunt fabricate, respectând cerințele și standardele internaționale.

Utilizare:



Pasul 1

Rupe ambalajul pornind de la o latură zimțată și scoate cu grijă prezervativul, deoarece poate fi deteriorat de unghii sau obiecte ascuțite (bijuterii sau piercing-uri). A se verifica data de expirare de pe ambalajul individual înaintea utilizării.



Pasul 2

Verifică dacă prezervativul este rulat spre exterior. Dacă este rulat spre interior, înseamnă că este pe dos. Strânge capătul închis al prezervativului pentru a te asigura că nu rămâne aer în interior.



Pasul 3

Continuând să strângi capătul închis, așază prezervativul pe vârful penisului și rulează-l în jos cu cealaltă mână. Dacă începe să se ruleze înapoi în timpul actului sexual, rulează-l la loc imediat. Dacă iese cu totul, oprește-te și pune alt prezervativ. Imediat după ejaculare, cât timp penisul este încă în erecție, prezervativul trebuie ținut ferm la baza penisului, înaintea retragerii acestuia, pentru a preveni alunecarea.

Prezervativele prea largi sau prea strâmte se pot rupe.
















Pasul 4

Dupa retragerea penisului, scoate pur și simplu prezervativul, împachetează-l într-un șervețel și aruncă-l în coșul de gunoi. Nu îl arunca în toaletă

Citește cu atenție informațiile despre produs, inscripționate pe partea interioară a pachetului, mai ales dacă folosești prezervativele pentru sex anal sau oral. Folosește un prezervativ o singură dată. Nicio metodă contraceptivă nu oferă protecție 100% împotriva sarcinii, HIV, sau a infecțiilor cu transmitere sexuală.

Prezervativele Durex sunt dispozitive medicale. Referitor la riscuri, citește precauțiile și instrucțiunile de utilizare sau întreabă-ți medicul!

Consultați medicul sau farmacistul dacă: utilizați unguente medicinale, aplicate pe penis sau vagin; senzația de iritare/disconfort persistă după utilizare; nu sunteți sigur dacă sunteți alergic la latex; un prezervativ prezintă scurgeri sau se rupe în timpul utilizării (acest lucru se face cât mai curând posibil, în termen de maxim 72 de ore); tu sau partenera ta experimentați dificultăți respiratorii sau aveți buzele albastre

	 Prezervative Durex Originals	 Prezervative Durex Feel Intimate	 Prezervative Durex Reel Feel	 Prezervative Durex Invisible	 Prezervative Durex Pleasure Me	 Prezervative Durex Intense
Ambalare	3/18 buc	12/18 buc	3/10/16 buc	10 buc	3/12 buc	3/10/16 buc
Lubrifiere		 extra lubrifiat				 extra lubrifiat
Formă						
Fără latex	x	x	✓	x	x	x
Circumferință	 56 mm	 56 mm	 56 mm	 52 mm	 56 mm	 56 mm
Grosime (micron)	 normală  ≥65<75	 subțire  ≥55<65	 normală  ≥65<75	 extra subțire  ≥45<55	 mare  ≥75	 normală  ≥65<75

Despre Durex:

Cu peste 90 de ani de experiență, Durex reprezintă o marcă de încredere pentru milioane de oameni din întreaga lume, în fiecare zi. Durex întrunește toate standardele de calitate pentru prezervative la nivel mondial, oferindu-ți încredere pentru o viață sexuală fără griji. Fiecare prezervativ este testat electronic pentru eliminarea defectiunilor și a fisurilor. Toate prezervativele Durex sunt fabricate prin

tehnologia „Easy on”, datorită căreia prezervativul poate fi aplicat ușor și repede, fiind totodată mai confortabil.

